

健康GO 登錄裝置 取扱説明書



目次

ユーザー登録	1
チェックイン端末の登録	5
登録ソフトのインストール	6
登録機器の固有番号をコピー(Bluetooth)	7
登録機器の固有番号のコピー(NFC)	8


1. ユーザー登録

- 1.1. インターネットブラウザのURL入力欄に「kenkou5.com」を入力し、健康GOのホームページに移動する




健康GOホームページ


1.2. マイページに移動し、「マイページ（外出ポイント）へのログインはこちらから」をクリック

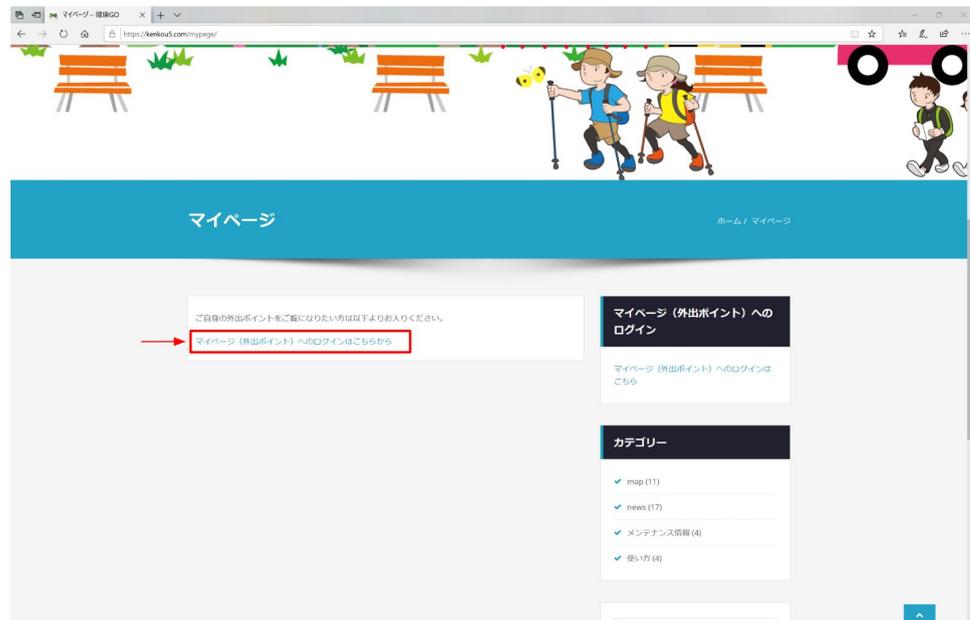


1.3. ログインページが開きますので、管理者アカウントでログインします。

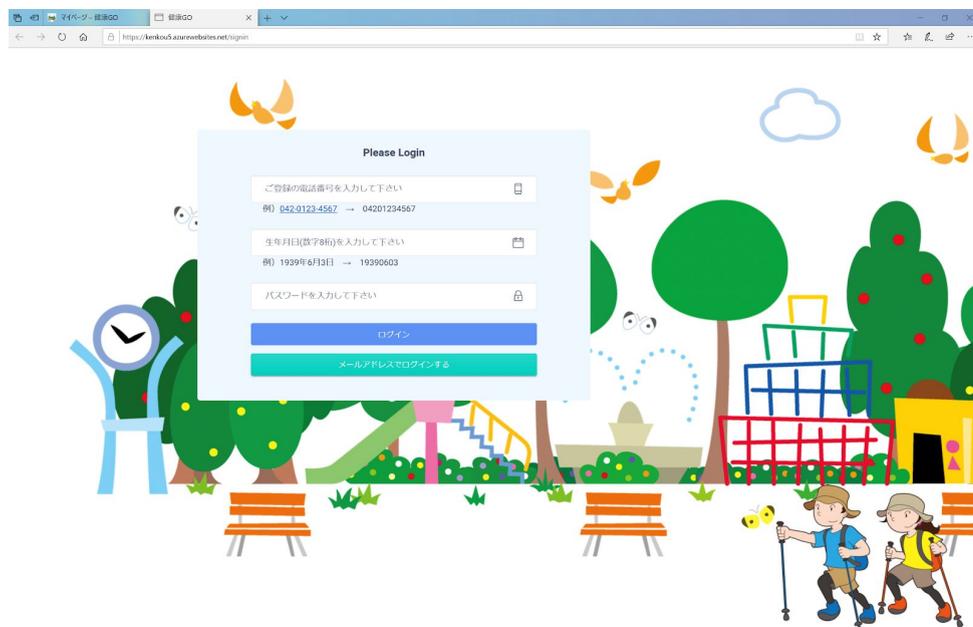

1.4. TOP画面が表示されます。「サービス提供者管理▼」から「ユーザー検索」をクリックします

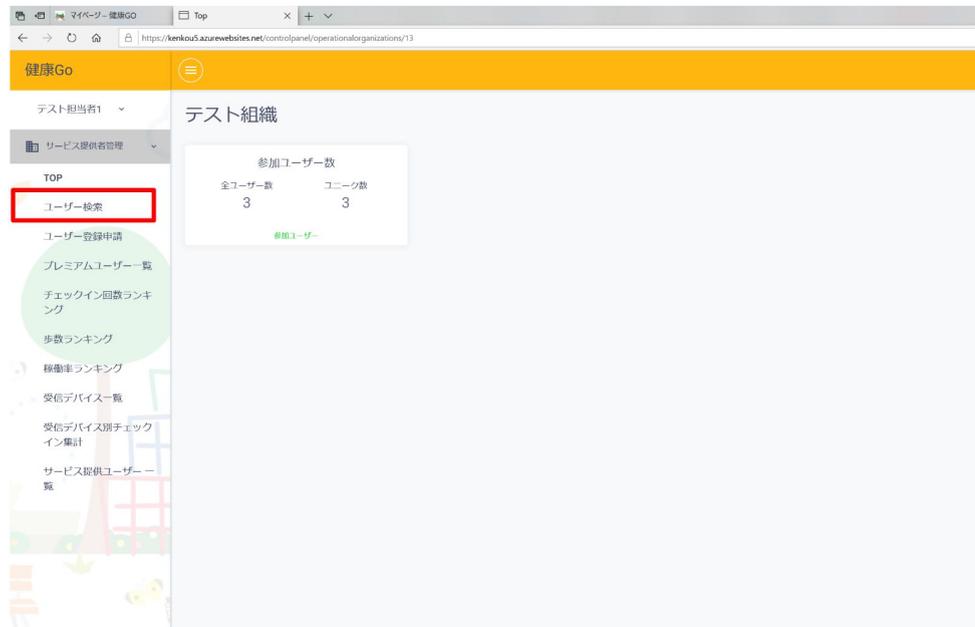

1.5. 追加をクリックします

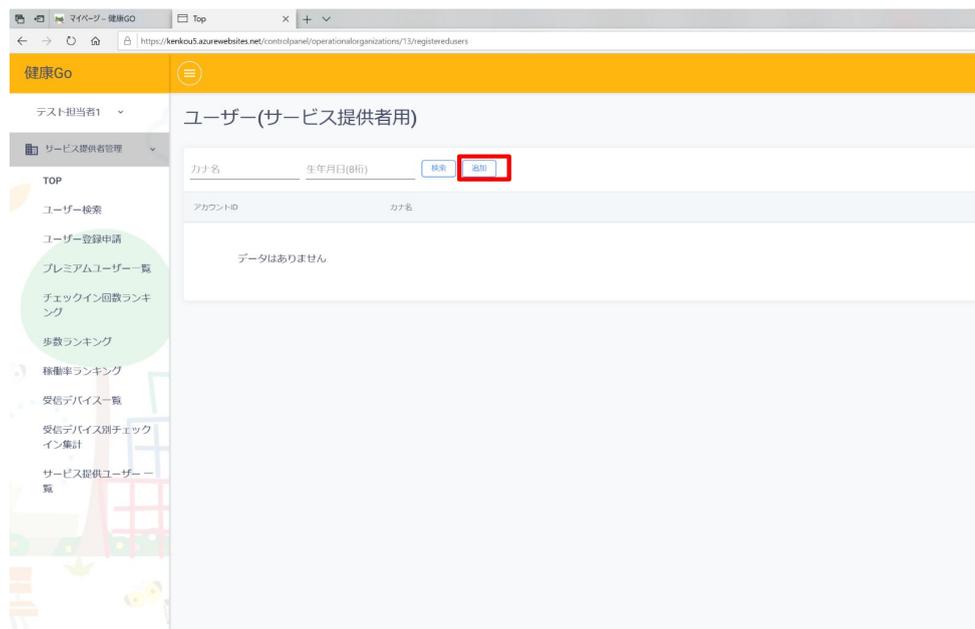

- 1.6. 各種情報を入力します。メールアドレスでログインするユーザーの場合、アカウントIDは自由入力を選択します。電話番号と生年月日でログインするユーザーの場合は固定を選択します。入力終わったら「Save」をクリックします

ユーザー追加

ユーザー名カナ

アカウントID

固定 自由入力

性別

男性 女性 不明

生年月日

郵便番号

電話番号

ウォークラリーランキング参加

パスワード

パスワード確認

Save Cancel

- 1.7. 登録したユーザーが表示されています。表示されていない場合は名前と生年月日から検索してください。ユーザーが参加しているグループがある場合は「参加グループ」から設定してください。

健康Go


ユーザー(サービス提供者用)

カナ名 生年月日(8桁) 検索 追加

カナ名	生年月日(8桁)	検索	追加
000000000020000101	トワロクテスト	検索	参加グループ

2. チェックイン端末の登録

- 2.1. 「サービス提供者管理▼」から「ユーザー検索」をクリックします。チェックイン端末を登録するユーザーを名前と生年月日から検索してください。検索したユーザーが表示されたら、「ユーザー管理▼」から「チェックイン端末」をクリックします

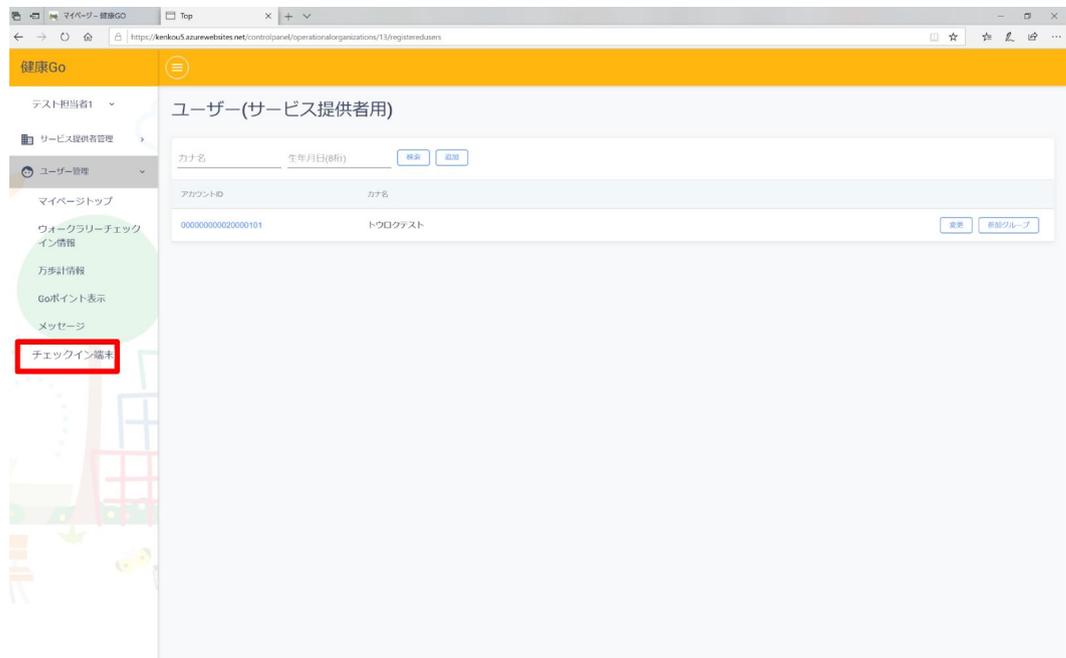

- 2.2. 追加をクリックします
- 2.3. 名称は「キーホルダー」や「万歩計」など任意に設定します。シリアルにデバイスの固有番号を貼り付けます（デバイスの固有番号のコピーは第3～5章を参照）。送信デバイスタイプはBluetooth機器の場合「BLE」、TH-550の表記があるNFC機器の場合は「TH-550」、それ以外のNFC機器の場合は「Mifare」を選択します

送信デバイス追加
名称
シリアル
送信デバイスタイプ please select
備考
Save Cancel



3. 登録ソフトのインストール

3.1. ダウンロードした.zipファイルを解凍します



3.2. 解凍後にできたフォルダ内の

bin→Debug→BT Felica Registration ver.〇〇 7byte.exe

を開くと登録ソフトが起動します

4. 登録機器の固有番号をコピー(Bluetooth)

4.1. 登録装置とパソコンを接続します



登録装置



USBケーブルで登録装置とパソコンを接続

4.2. 登録ソフトを起動します

- 4.3. Bluetooth機器の電源をONにして登録装置の中心に入れ、蓋を閉めます
- 4.4. 登録ソフトの「Bluetooth機器スキャン」ボタンをクリックします



- 4.5. 約40秒間待ちます
- 4.6. 「クリップボードに登録機器の固有番号(12桁)「〇〇〇...〇〇〇」をコピーしました。」というメッセージが表示されれば、成功です。



5. 登録機器の固有番号のコピー(NFC)

- 5.1. NFCリーダーとパソコンを接続します



- 5.2. 登録ソフトを起動します
- 5.3. NFC機器をNFCリーダーの上に置きます



5.4. 登録ソフトの「NFCスキャン」ボタンをクリックします



- 5.5. 「〇〇〇〇を検知したので個体番号をスキャンします。」というメッセージが表示されます
[OK]ボタンを押します



- 5.6. 「クリップボードに万歩計の固有番号(14桁、16進数)「〇〇〇...〇〇〇」をコピーしました。」というメッセージが表示されれば、成功です。

